

Novorozenecká postýlka BeLLY

Novorozenecká postýlka Belly je ideálním řešením pro zajištění nejblížšího kontaktu mezi matkou a dítětem.


Konstrukce postýlky nabízí širokou škálu polohování včetně výškového nastavení, které umožňuje postýlku umístit nad většinu běžných lůžek. Matka tak může o své malíčké pečovat přímo z lůžka.

Brzdítelná kolečka, velmi dobrá stabilita ve všech polohách, odnímatelná vanička i její ochranný rám dělají postýlku maximálně bezpečnou. Díky průhlednému materiálu vaničky budete mít neustále přehled o tom, co miminko právě dělá. Do průhledné kapsy v čele vaničky lze také jednoduše umístit jmenovku dítěte.


Novorozenecká postýlka Belly je navržena pro děti do 4 měsíců.



Praktická
Variabilní
Bezpečná

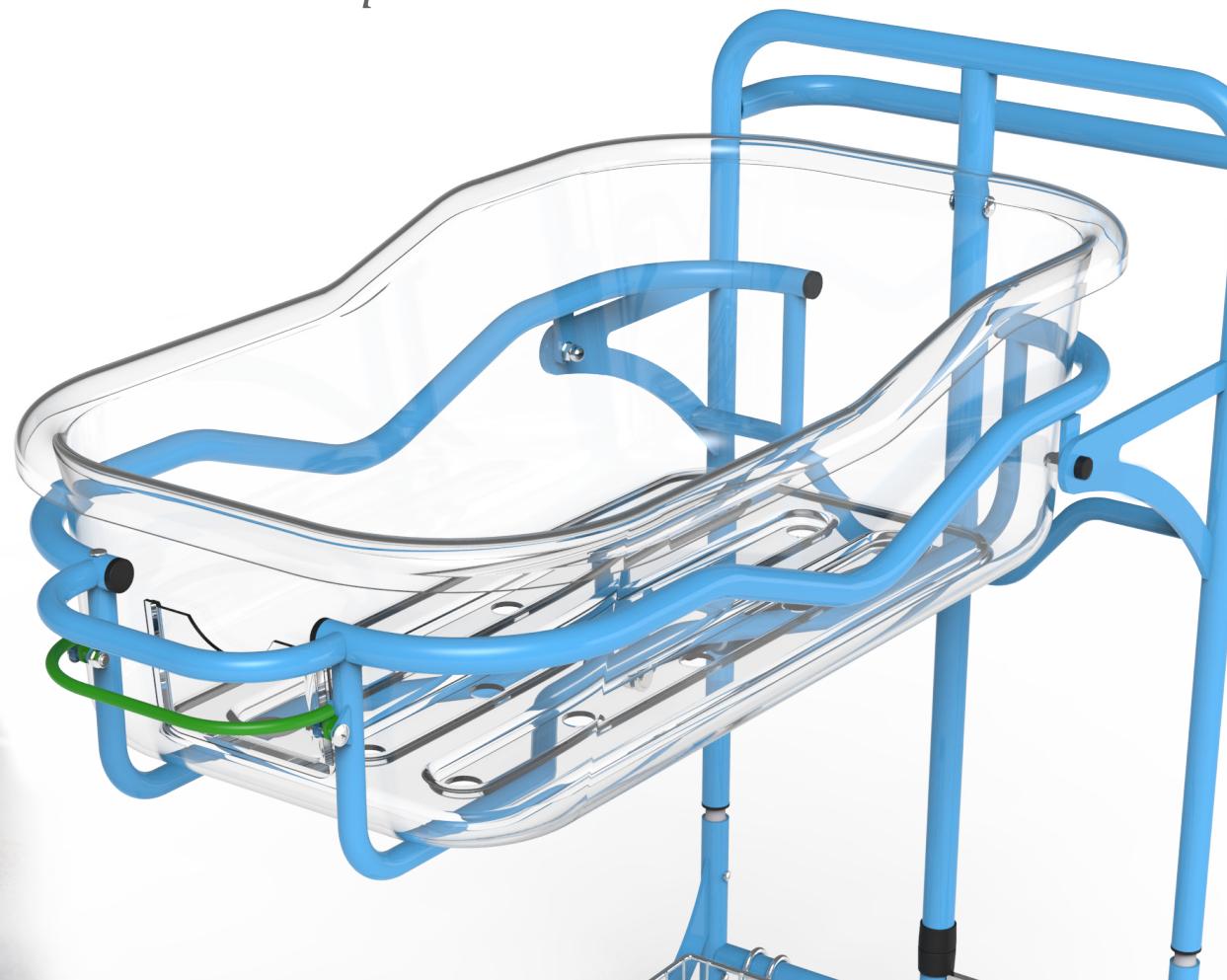

BAREVNÉ VARIANTY

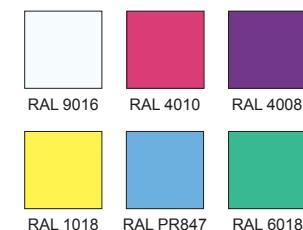

MADLO PRO SNADNOU MANIPULACI

Pro snadnou manipulaci a bezpečné přesouvání je postýlka vybavena manipulačním madlem.

ODNÍMATELNÁ TRANSPARENTNÍ VANIČKA

Plastová vanička je vyrobena ze zdravotně nezávadného PET materiálu, který plně odpovídá nejvyšším požadavkům a standardům pro použití v kontaktu s nejmenšími dětmi. Ve spodní části vaničky jsou vytvořeny otvory, které zajišťují optimální cirkulaci vzduchu pod matrací.

INTELIGENTNÍ KONSTRUKCE

Díky široké škále polohování včetně výškového nastavení je možné postýlku umístit nad většinu běžných lůžek. Matka tak může být vždy v nejbližším kontaktu se svým miminkem.

VÝŠKOVÉ NASTAVENÍ


Můžete si vybrat z pestré nabídky různých designů novorozenec postýlky. Základní verzi bez výškového nastavení nebo vyšší verze, které umožňují snadné nastavení výšky vaničky pomocí nožního pedálu či ručního ovládání. Vanička je během nastavování nadlehčována plynovou pístnicí.

ODNÍMATELNÝ KOŠÍK

Ve spodní části postýlky může být umístěn odkládací košík pro všechny nezbytné při péči o miminko.

KOLEČKA

Brzdítelná kolečka umožňují snadné přemístění postýlky a bezpečnou manipulaci.

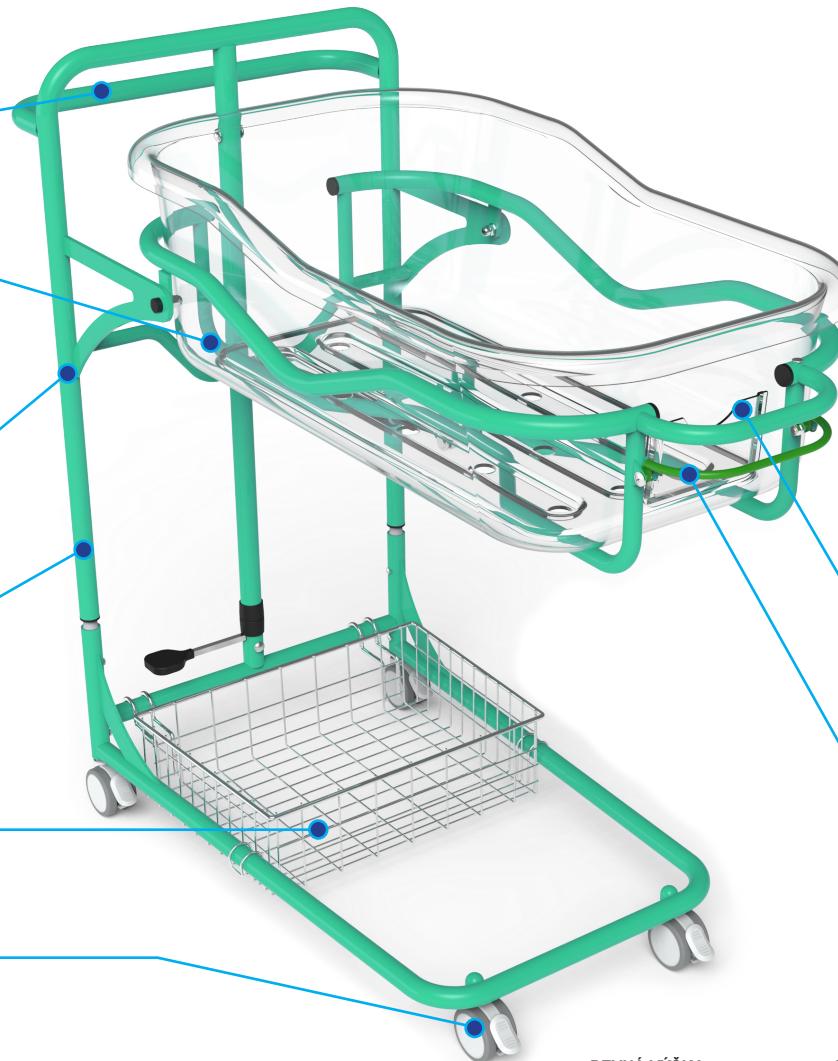

KAPSA NA JMENOVKU

Jmenovku miminka můžete umístit do průhledné kapsy v čele vaničky.

NAKLÁPĚNÍ VANIČKY

Optimální polohu pro miminko můžete už u základní verze jednoduše nastavit do několika pozic pomocí polohovacího hřebene. U vyšší verze lze pak vaničku snadno nastavit do libovolné pozice jednou rukou za pomocí plynové pístnice.

| STANDARDNÍ VARIANTY | PEVNÁ VÝŠKA | | VÝŠKOVĚ POLOHOVATELNÉ NOHOU | | VÝŠKOVĚ POLOHOVATELNÉ RUKOU | |
|----------------------------------|-------------|------------|-----------------------------|------------|-----------------------------|------------|
| | Varianta 1 | Varianta 2 | Varianta 3 | Varianta 4 | Varianta 5 | Varianta 6 |
| Rozměry vaničky | 75 x 40 cm | 75 x 40 cm | 75 x 40 cm | 75 x 40 cm | 75 x 40 cm | 75 x 40 cm |
| Výškové polohování vaničky | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Mechanismus výškového polohování | mechanické | pístnice | mechanické | pístnice | mechanické | pístnice |
| Naklápací vaničky | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Věk novorozence do | 4 měsíce | 4 měsíce | 4 měsíce | 4 měsíce | 4 měsíce | 4 měsíce |
| Maximální váha novorozence | 10 kg | 10 kg | 10 kg | 10 kg | 10 kg | 10 kg |
| Odnímatelný košík | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Rozměry matrace | 74 x 39 cm | 74 x 39 cm | 74 x 39 cm | 74 x 39 cm | 74 x 39 cm | 74 x 39 cm |
| Výška matrace | 4 cm | 4 cm | 4 cm | 4 cm | 4 cm | 4 cm |

